

TANITA® Digital

Model THD-305

P97.19

Operating Instructions

Digital Scale

Bedienungsanleitung

Digitale Waage

Mode d'emploi

Pèse-personne Digital

Handleiding

Digitale Personenweegschaal


Istruzioni per l'uso

Bilancia Pesapersona Digitale


Instrucciones de Operación

Balanza Digital


1

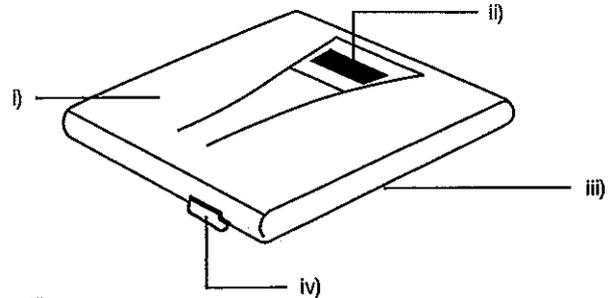


2.

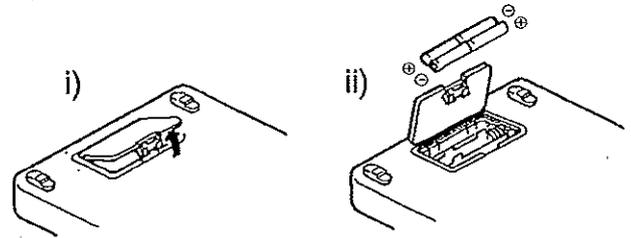


iii)

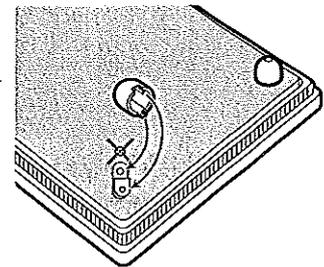


3.

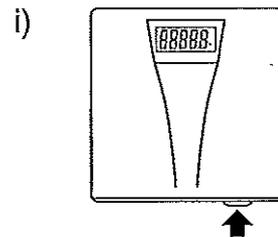

ii)

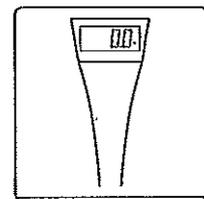

iii)

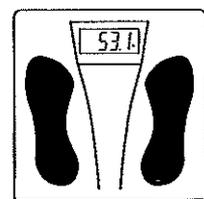

Mode d'emploi

Capacité & graduation
0 - 136 kg par 100 g
Alimentation : 4 x piles LR6 1.5V (incluses)

1. Description

- i) Corps de l'appareil
- ii) Ecran d'affichage
- iii) Dessous de l'appareil (insertion des piles)
- iv) Touche de mise en marche

2. Consignes de préparation

Insertion des piles

Retournez le pèse-personne et retirez le couvercle du tiroir à piles en faisant jouer le loquet (voir fig. 2.i), puis insérez les 4 PILES LR6 1.5V (incluses) en veillant à respecter les règles de polarité indiquées.(voir fig. 2.ii)

Note : En cas d'affichage du message "Lo" lors de la pesée, remplacez les piles. Cependant "Lo" ne s'affichera pas si la tension des piles est trop faible.

Installation du pèse-personne

Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane pour assurer la précision de la pesée. Si le sol est moqueté, nous conseillons de placer un aggloméré sous l'appareil.(voir fig. 2.iii)

3. Comment utiliser le pèse-personne

Appuyez doucement sur la touche de mise en marche avec le gros orteil pour déclencher l'affichage de "88888" (fig. 3.i). A l'apparition du zéro "0.0" (fig. 3.ii), montez sur le pèse-personne et restez immobile jusqu'à stabilisation du poids affiché, ce qui prend environ 1 seconde (fig. 3.iii).

Note : "0.0" disparaît si vous ne montez pas sur le pèse-personne dans les 10 secondes.

Lorsque vous descendez du pèse-personne, l'écran affiche de nouveau "0.0" et le pèse-personne s'éteint automatiquement. Le message "OL" apparaît à l'écran lorsque le poids dépasse la capacité de l'appareil.

- fig.3.i) APPUYEZ SUR LA TOUCHE
- fig.3.ii) AFFICHAGE DE "0.0"
- fig.3.iii) MONTEZ

Pour une pesée exacte

Ce pèse-personne est un instrument de précision, très sensible aux mouvements du corps. Pour une précision optimum, montez doucement sur le pèse-personne, relaxez-vous et restez immobile. Il est normal que votre poids varie au cours de la journée. De légères fluctuations de poids sont en général normales.

4. Conseils d'entretien

1. N'essayez pas d'ouvrir le pèse-personne, de toucher à son mécanisme ou circuit sous peine d'annuler toute couverture de garantie.
2. Ce pèse-personne s'éteindra automatiquement après votre descente de l'appareil.
3. Veillez à ne pas déverser d'eau ou de produits chimiques liquides sur l'appareil. Essuyez régulièrement le pèse-personne avec un torchon humide.
4. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure.
5. Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dommage.
6. "OL" apparaît lorsque le poids dépasse la capacité de l'appareil.